

Missing Teeth? Want Aesthetics and Simplicity?

PERFECT A SMILE™



Before Perfect A Smile™

Perfect Smile!

クリアサーモフォーミング材への審美的アプローチ

Perfect A Smile™

- 欠損歯のサーモフォーム材での審美的回復
- テンポラリー製作へのイメージ回復
- インプラント治療中の審美回復
- 先天的に不足している歯への審美的回復

種類

ライト/ミディアム/ダーク/ニューライト/

ニューミディアム 各4g入り 医院価格 8,000円

マイクロブラシス—パーファイン

医院価格 100本入り 5,300円

Developed by Orthodontist Dr. Laurel Martin, Perfect A Smile


NEW! パーフェクタスマイル簡単操作方法

Pontic Paint

(Patent Pending)



使用前
Perfect-A-Smile™

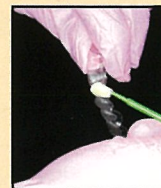

色調を選び必要に応じて混ぜて塗布します。



塗布面を光重合



使用後
Perfect Smile!

クラックなく柔軟性ある材質

Beautiful aesthetics for missing teeth is now Easy, Fast, Perfect!

- Perfect A Smile™
欠損歯を簡単に審美的回復する組み合わせが新しいシステム
- Perfect A Smile™
クリアサーモフォーム材の内面に塗布しコンディショナーや
ブラステックプレパレーションを必要とせず光重合する簡単作業

- Perfect A Smile™
サーモフォーム材をガイドにフレキシブルにペイントする簡単作業
- Perfect A Smile™
最も多様される3シェードにライト/ミディアム/ダークを追加し
ミキシングして審美的に最適なシェードを作り出すことが可能です。

Perfect A Smile™



Reliance Orthodontic Products, Inc.

Developed by Orthodontist Dr. Laurel Martin, Perfect A Smile™



製造販売元



グローバルな視点で歯科を考える

リンカイ株式会社

www.rinkai-tokyo.co.jp

リンカイ

検索

お問い合わせ、資料請求は ミンナヨイハ

0120-307418

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階 TEL: 03-3359-4321 FAX: 03-3353-8403

Perfect A Smile[®]

ポンティックアライナーペイント

加熱形成されたプラスチックアライナー / クリアリテーナー用 ポンティックペイント

使用方法： The Perfect A Smile[™] ポンティックペイントは、熱可塑性アライナーの光重合性着色剤として使用します。

この特許取得済みのフォーミュラは、透明な加熱形成アライナープラスチックで機能します。曇りがかった (C) 加熱形成材料との使用はお勧めしません。


****光に反応します! 製品は光から遠ざけて下さい! ****
****使用しない時は瓶に蓋をしておいて下さい****

使用方法：

1. 製品の硬化による均一性を確保するために、ポンティック塗料を均一になるまでスパチュラで十分に混合してください。それぞれの使用前に混合しなければなりません。
2. 希望する量を取り出し、ミキシングパッドに置きます。光から保護するため、**すぐに蓋を元に戻して下さい。**



3. ポンティックペイントをマイクロブラシアプリケーターで一度に数回塗布し、それを3～4回繰り返します。各コーティングの後に、歯科用光重合器で10秒間光を近距離で照射します。
 注：シェードは、希望の色をだすためにミキシングパッド上で混合します。
4. 最終コートを塗布して光重合させた後、アライナーを通し、唇側から20秒間最終的に光重合します。

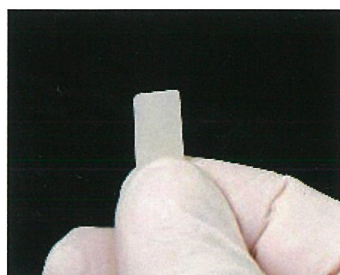

注意： Perfect A Smile[™]のポンティックペイントシステム向けのリライアンスシェードガイドは、Vita[®]シェードガイドと同一ではありません。シェードガイドは、Perfect A Smile[™]ポンティック塗料で再現できる色を表しています。異なるアライナー材料は、シェードの見た目にわずかな違いをもたらします。アライナー材料との最も正確なマッチングのために、各シェードの3回のコーティングをワックスでカバーしたミキシングパッドに置き、コーティングの間に10秒間光重合させ、シェードガイドを製作します。次いで、最終的に重合したテンプレートを、ミキシングパッドから持ち上げて、マッチングさせるため歯に装着します。

再注文情報： New Light Shade Catalog# PASL, New Medium Shade Catalog # PASM (Matching the Invisalign[™] PVS shade Light and Medium)

Perfect A Smile Original Shade Catalog# Light (PPB1), Medium (PPA2) and Dark (PPA3)



注意： 未重合のレジンは皮膚の敏感な方は、問題が生じる可能性があります。皮膚に触れた場合は、石けんと水でよく洗ってください。他の組織との接触：多量の水ですぐに接触した部分を数分間すすいで下さい。臭いを吸い込まないで下さい。十分に換気された場所で使用して下さい。マイクロブラシ アプリケーターは使い捨て商品です。作業毎に新しいマイクロブラシ アプリケーターをご使用下さい。

UV、ハロゲンおよびLED重合ライトの使用は、目にダメージを与える可能性があります。患者、医師および助手は、これらの光重合装置を使用するときは、適切に設計された保護眼鏡を着用する必要があります。

 温度制限：室温（15～30℃を超えない）で保管してください。

保証： Reliance Orthodontic Products Inc.は、不良品であることが判明した場合、製品を交換する責任を負います。Reliance Orthodontic Products, Incは、記載されている製品の使用または使用不可能に起因する、直接的または間接的な損害または損失に対して、責任を負うものではありません。